


## ストマッカー用袋

～検体と希釈水を混和する際に使用する滅菌袋です～


## ご使用方法

1. 検体を秤量します 
2. 希釈水と検体をストマッカー用袋に入れて混ぜます

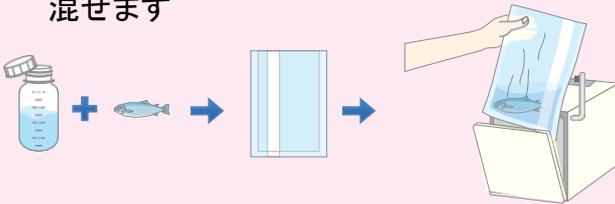

## ※フィルター付ストマッカー用袋の場合

サンプルを処理した後、  
切り口を開けて  
検液を採集します

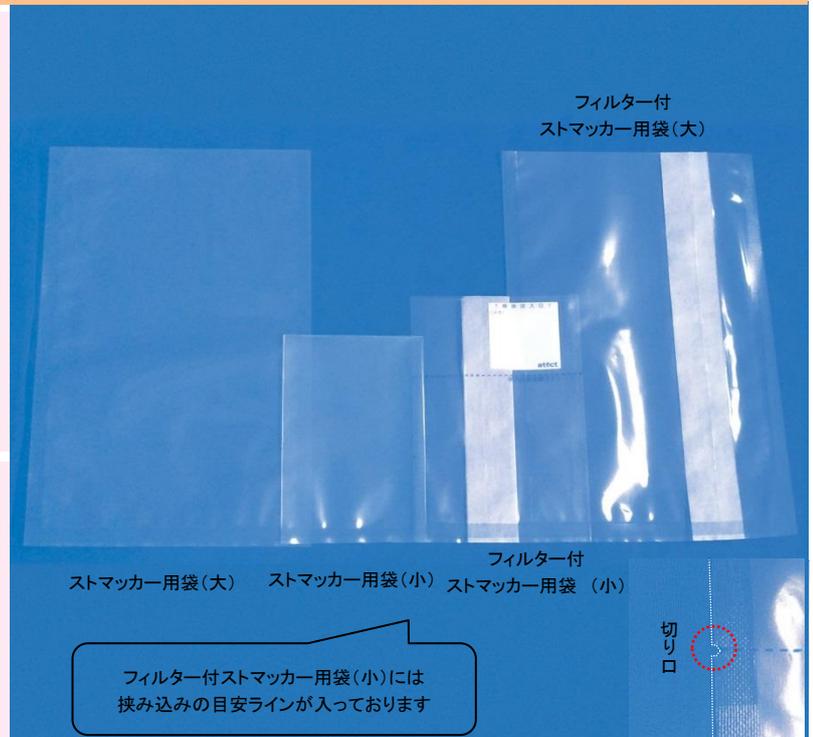

フィルター付ストマッカー用袋(小)には  
挟み込みの目安ラインが入っております

切り口

## 特徴

- フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。
- チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。
- フィルター付ストマッカー用袋(小)は検体投入口に書き込みができます。

## ■ 製品仕様

品名	ストマッカー用袋(大)	ストマッカー用袋(小)	フィルター付 ストマッカー用袋(小)	フィルター付 ストマッカー用袋(大)
切り口	無し		有り	
品番	061-11200	061-11300	061-21013	061-21001
サイズ	30cm × 19cm	15cm × 11cm	12cm × 18cm	30cm × 19cm 厚み 0.065mm
入数	1000 枚/箱 (20 枚包装 × 50 袋)		500 枚/箱 (5 枚包装 × 100 袋)	500 枚/箱 (20 枚包装 × 25 袋)
材質	ナイロン/ポリエチレン			
滅菌方法	ガンマ線滅菌			
送料	弊社負担			

少数での販売も行っております。詳しくはお問合せください。  
サンプルをご用意しております。お申しつけください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト ストマッカー用袋

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)