Product Information

全てのお客様のために Full-Steri 直販のブランド

腸炎ビブリオ用 生培地TCBS寒天

~生培地(培地分注済みシャーレ)のご案内~

●検出可能な菌: 腸炎ビブリオ


●培養条件:35±2℃ 24~48時間

●判 定:コレラ菌:黄色コロニー腸炎

ビブリオ:中心部が青緑色コロニー

●特 徴:

本培地は腸炎ビブリオ・コレラ菌の分離培地です。 腸炎ビブリオのような白糖非分解菌は中心部が 青緑色のコロニーを形成します。コレラ菌や V.alginolyticusのような白糖分解菌は混濁し た黄色のコロニーを形成します。

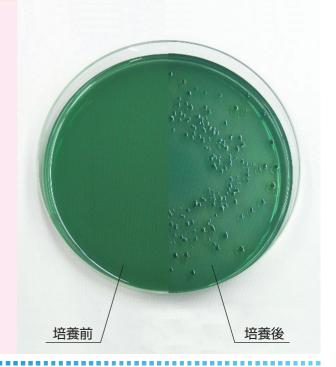

組成 (g/L)カゼインペプトン 5.0g 肉ペプトン 5.0g 酵母エキス 5.0g クエン酸ナトリウム 10.0g チオ硫酸ナトリウム 10.0g ウシ胆汁末 5.0g コール酸ナトリウム 3.0g 白糖 20.0g 塩化ナトリウム 10.0g クエン酸鉄(Ⅱ) 1.0g チモールブルー 0.04g ブロモチモールブルー 0.04g 14.0g 寒天 $0.02 \pm 0.8 = 0.2$ アテクト 生培地

●製品仕様

品	番	053-13004	053-13104
品	名	生培地TCBS寒天	
入	数	100枚(10枚×10袋)	50枚(10枚×5袋)
価	格お問合せください		
使用期限		製造日より3ヶ月	
保存方法		4℃~8℃ (冷蔵保存)	
送 料 弊社負担		負担	

*お試し用サンプルをご用意しております。ご用命下さい**10枚単位での販売を行っております。ご連絡ください*

全てのお客様のために Full-Steri 直販のブランド

ご発注は、フリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

株式会社アテクト

滋賀県東近江市上羽田町3275番地1 TEL 0748-20-3535 FAX 0748-25-7171 URL http://www.atect.co.jp E-mail biosales@atect.co.jp

アテクト 検査

検索